

Akbody[®]

PERFECCIÓN


en el TRATAMIENTO de CELULITIS



● MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA[®]
endoSPHÈRES[®]
THERAPY

▶ Endosphères Therapy® utiliza la MICROVIBRACIÓN COMPRESIVA® metodología patentada y 100% Made in Italy que representa una nueva era en el tratamiento de las patologías estéticas y rehabilitadoras. Importantes centros de investigación e instituciones médico-universitarias han realizado numerosos estudios clínicos probando la extraordinaria eficacia del tratamiento.

▶ La metodología actúa a través de un manipulador equipada con 55 esferas de silicona con características específicas, densidad y diámetro específico colocadas en una "celda de abeja".

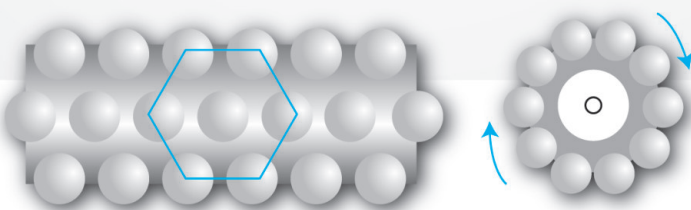


▶ disposición de las esferas en "CELDA DE ABEJA"

5 acciones SINÉRGICAS


El dispositivo transmite una vibración de baja frecuencia, la MICROVIBRACIÓN COMPRESIVA, que genera una acción pulsada y rítmica en los tejidos. La onda generada, actúa en varios niveles, realizando cinco acciones sinérgicas, restableciendo en primer lugar las condiciones fisiológicas vasculares y tisulares y, a continuación, llevando a cabo una remodelación localizada en esas partes menos estéticas de la piel.

acción ANALGÉSICA

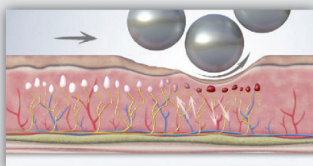


La Microvibración Compresiva estimula los receptores específicos en la dermis y mejora la oxigenación. Esta acción ayuda a reducir la inflamación del tejido y eliminar el dolor en poco tiempo.

acción de DRENAJE

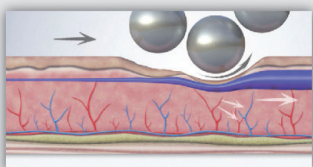


El movimiento de las esferas y la dirección de rotación del cilindro crean un efecto "bomba" que activa el sistema linfático eliminando los líquidos tóxicos.

acción VASCULAR

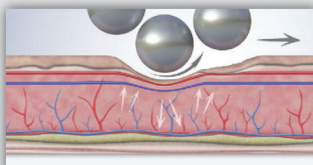


Endosphères estimula la vascularización gracias a la disposición particular de las esferas en celda de abeja. El tejido se somete a una "gymnasia vascular" que restablece la microcirculación.

acción de REMODELACIÓN

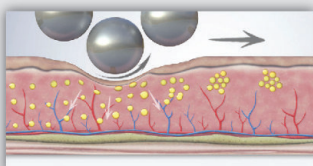

La acción oscilatoria de las esferas determina la desintegración de la acumulación de grasa responsable del aspecto de la piel de naranja. Esta acción reduce las alteraciones estéticas y remodela ya desde los primeros tratamientos.

acción MUSCULAR

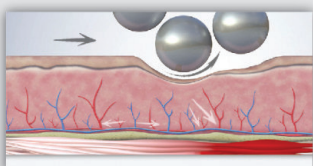

El sistema de Microvibración Compresiva, utiliza el músculo como resistencia activa y gracias a la estimulación vibratoria, permite obtener una optimización del tono muscular en las zonas tratadas.

Akbody®

mejor relación
► **CALIDAD/PRECIO**
entre los equipos corporales

tecnología
► **VERSÁTIL**
con resultados probados y seguros

► **TECNOLOGÍA**
DE NUEVA GENERACIÓN



las oscilaciones mecánicas de baja frecuencia
actúan en profundidad sobre las causas
principales de la celulitis.

► **FIDELIZA**
de los clientes

▶ **SIN**
DOLOR

▶ **100%NO**
INVASIVO

▶ **RESULTADOS** desde las
PRIMERAS SESIONES



campos de aplicación **TRATAMIENTO CORPORAL**

Celulitis • Piel de naranja • Contracturas musculares • Edemas
Piernas hinchadas • Brazos • Glúteos • Tobillos • Grasa Abdominal
Reafirmación de los senos • Fase posterior del embarazo

- ▶ REDUCE LA ESTASIS LINFÁTICA
- ▶ ALISA LA PIEL DE NARANJA
- ▶ MEJORA LA MICROCIRCULACIÓN
- ▶ MODELA EL CUERPO
- ▶ OPTIMIZA EL TONO MUSCULAR



CIÓN
tes

▶ **AUMENTO**
de beneficios

▶ **RETORNO RÁPIDO**
de la inversión

310Hz
de potencia

Las observaciones clínicas y los estudios realizados, concluyen que el método **Endosphères Therapy** constituye una técnica válida y fiable, que encuentra su aplicación óptima en el tratamiento de patologías celulíticas, venolinfáticas y musculares.

Con el fin de obtener un correcto diagnóstico, todos los pacientes sujetos al estudio se han sometido a un proceso de valoración del historial clínico, inspección y palpación de los tejidos y a un examen instrumental primario, que incluye las siguientes pruebas: ecografía, ecocolordoppler, termografía y análisis de impedancia bioeléctrica. Las pruebas se han realizado cada seis sesiones, a fin de poder monitorizar las variaciones de los tejidos en el curso del tratamiento. **Los resultados obtenidos demuestran la eficacia del tratamiento con Microvibración Compresiva.**

Courtesy
Università degli Studi
"G. d'Annunzio"
Facoltà di Scienze
dell'Educazione Motoria
Cattedra di Medicina
Fisica e Riabilitativa

RESULTADOS PROBADOS BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA


Resultados después de **8** sesiones



Resultados después de **15** sesiones



Resultados después de **18** sesiones

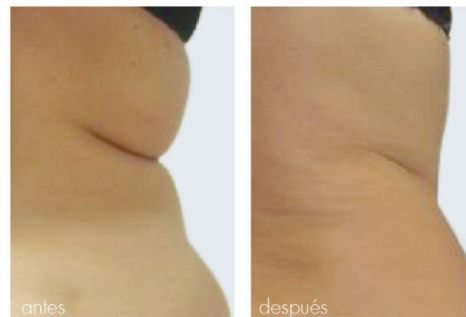

Imágenes del archivo del XI Congreso Internacional SIES Medicina y Cirugía Estética

Akbody®



SISTEMA Ak Body

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro	315mm(up)/364mm(down)
Altura	1.150 mm
Peso	15 kg
Vibración Transmitida	29 - 310 Hz
Refrigeración	ED/AIRCOOLING
Touch Screen	Capacitivo 7 Color
Sound Level	56dBA
Características técnicas	da 100 a 240 V./ 50-60Hz

www.endospheres.com

Endosphères Therapy AkBody es patentado, fabricado y distribuido por



Fenix Group, empresa íntegramente italiana, desde hace más de diez años es protagonista en el sector de la estética y en el ámbito de la maquinaria médico-estética, convirtiendo la investigación y el desarrollo en sus puntos fuertes. Fenix Group es la empresa que ha ideado la tecnología **Endosphères Therapy**, un método patentado que utiliza la Microvibración Compresiva, técnica que, durante los últimos años, ha ido ganando fama a nivel internacional como tratamiento de excelencia para combatir la celulitis, las acumulaciones de tipo adiposo y las alteraciones estéticas del rostro.

Fenix Group es una empresa dinámica y muy enfocada en la comunicación. Por ello, cada año invierte en campañas publicitarias para dar visibilidad a publicaciones

especializadas del sector y se mantiene activa en las redes sociales. Fenix Group ofrece soporte a sus clientes durante todas las fases del proceso: además de garantizar un eficiente servicio de asistencia técnica, también asiste al cliente desde la etapa inicial hasta la etapa de consolidación de la actividad.

La exitosa misión de la empresa consiste en desarrollar las mejores soluciones electro-médicas a través de la producción y distribución de dispositivos innovadores, competitivos y eficientes, con el desarrollo de tecnologías basadas en estudios científicos preliminares, necesarios para garantizar resultados y seguridad, (y que permiten sentirse orgullosos de la metodología Made in Italy), convirtiéndose así en el orgullo Made in Italy.



Headquarters ITALY

Fenix Group s.r.l. - Strada Lungofino, 187 - c/o C.C. Ibisco B9/10 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. **+39 085 4483235** - info@fenixgroup.it



Branch Office SPAIN

Fenix Endospheres Therapy SL - C/ Cirilo Amoros, 6 Entresuelo 46004 - Valencia.
Tel. **+34 96353900** - espmanagement@fenixgroup.it



Branch Office U.K.

Fenix Group LTD - 51 Holland Street, London W8 7JB
Tel: **+44(0)2070960040** - ukmanagement@fenixgroup.it



Branch Office FRANCE

Fenix France S.A.S. - Startway 43-47 Avenue de la Grande Armée - 75016 PARIS
Tel: **+34(0)170395146** - frmanagement@fenixgroup.it

For other countries look for distributors on www.endospheres.com